




АРМЕД®
NON PROGREDI, EST REGREDI

Столик надкроватный
«Armed» модель ZE08-D

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

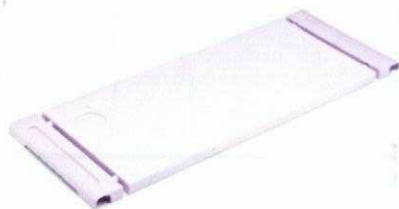

Ширина ($\pm 5\%$), мм	340
Длина ($\pm 5\%$), мм	890-1090
Максимальная нагрузка, кг	15
Вес нетто, кг	3
Столешница	прямоугольная

Пластиковый надкроватный столик «Armed» модель ZE08-D с регулировкой ширины для установки на боковые ограждения.

Надкроватный столик «Armed» модель ZE08-D имеет раздвигающиеся кронштейны, с помощью которых легко устанавливается на боковые ограждения кровати. При необходимости, установите крючки на специальные отверстия, для удобства хранения столика на боковых ограждениях. Столик изготовлен из ABS-пластика и оснащён для прочности стальными кронштейнами и рамой. Используемые материалы и особенности открытой конструкции столика позволяют с лёгкостью его мыть под струёй воды

ВНИМАНИЕ



Максимальная допустимая нагрузка на столик - 15 кг.

Не следует превышать этот предел.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

• Для очистки: Аккуратно протрите стол мягкой, чистой и влажной тряпкой.

ВНИМАНИЕ



Не используйте моющие средства, которые могут повредить отделку стола.

• Чтобы вымыть более тщательно пользуйтесь мягким мылом и водой.

• Насухо протрите стол чистой, мягкой тканью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стол надкроватный _____ 1 шт.
2. Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции столика, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Столик надкроватный «Armed» модель ZE08-D соответствует нормативной документации и признан годным для эксплуатации.

Изготовитель: Shanghai Rongshun Medical Technology Co., Ltd,
office Room 317, 62 Xiushan Road, Chongming Industrial Park, Shanghai, China

"Шанхайские Медицинские Технологии Ронгшан Ко., Лтд",

Офис 317, 62 Ксиушан Род, Чонгминг Индастриал Парк, Шанхай, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медимпорт»

630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, пом. 14

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.